
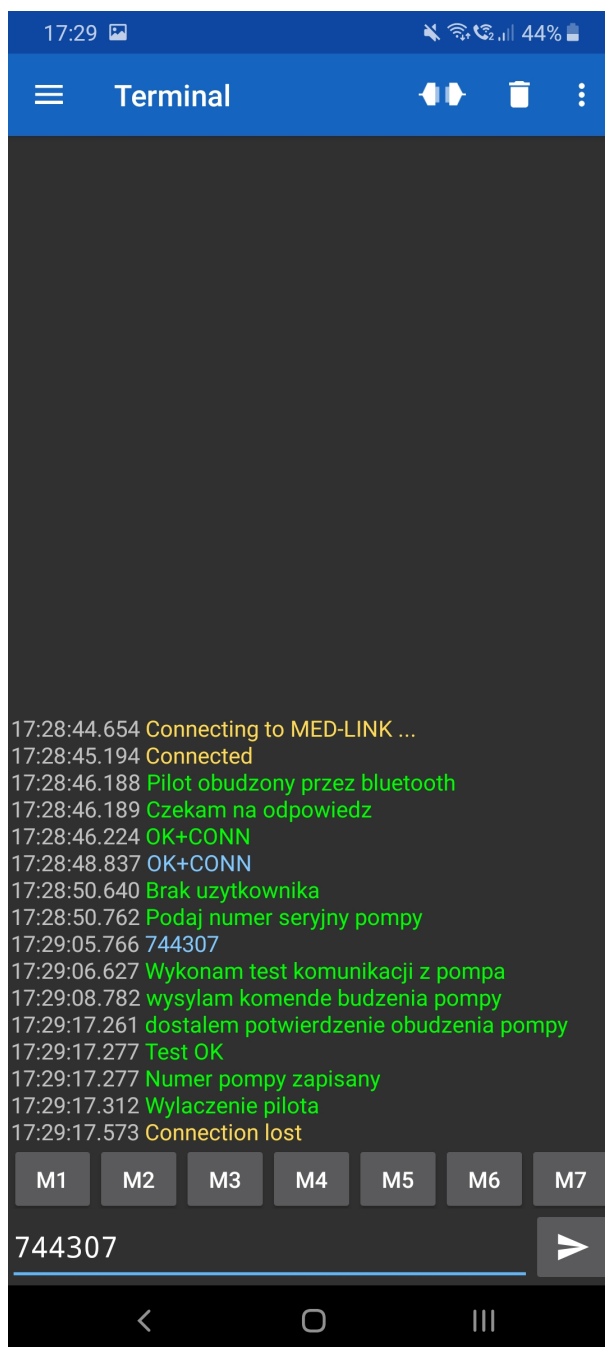


## Pierwsze uruchomienie pilota Med-Link v4 czy wersji bez wyświetlacza.

1. W systemie Android należy włączyć bluetooth i wykonać skanowanie.
2. Na liście znalezionych powinien pojawić się pilot jako nazwa MED-LINK.
3. Kliknąć w nazwę pilota i wykonać parowanie z PIN = 000000.
4. Następnie połączyć się z terminalem bluetooth (opis w instrukcji pierwszego uruchomienia wersji z wyświetlaczem).
5. Wykonać łączenie z terminala poprzez odesłanie polecenia OK+CONN.
6. Dostaniemy informację, że w pilocie nie ma zapisanego użytkownika.

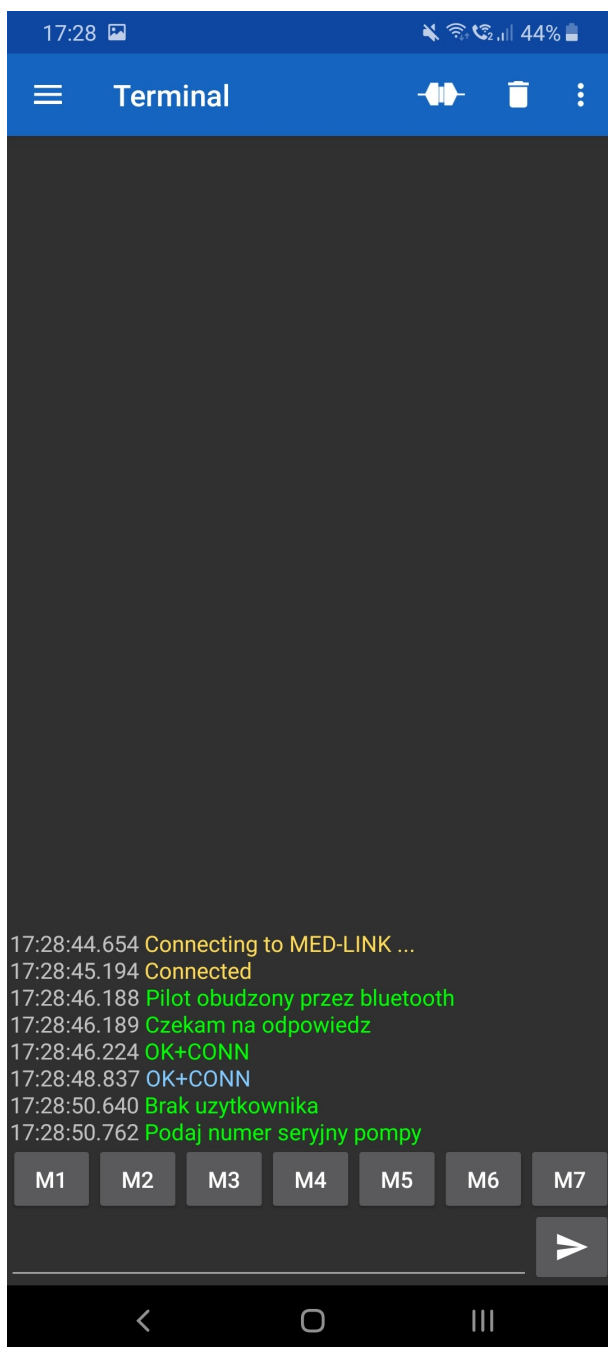

7. Należy podać 6 cyfr swojego numeru pompy.
8. W kolejnym kroku pilot wykona testową komunikację i jeżeli zostanie w ciągu około 10-12 sekund odpowiedź na obudzenie pompy to odpowie, że test jest OK a numer został zapisany w pamięci pilota.
9. Po tej operacji pilot jest gotowy do działania i tym samym w programie został zapisany nowy nr PIN, który jest teraz taki jak numer powiązanej pompy.
10. Najlepiej teraz rozparować pilota (anulować powiązanie w systemie Android).
11. Wyłączyć na kilka sekund pilota i ponownie go włączyć.
12. Wykonać nowe wyszukiwanie pilota przez bluetooth w systemie Android i dokonać parowania z PIN = numer pompy.
13. W przypadku gdy znajdzie potrzeba skasowania numeru pompy z pamięci pilota wystarczy wysłać w ciągu 10 sekund polecenie KASUJ zamiast OK+CONN, co spowoduje przywrócenie programu z brakiem użytkownika i ustawienie PIN = 000000. Można po tym zacząć od nowa.

17:28:17.749 Connecting to MED-LINK ...  
17:28:18.509 Connected  
17:28:19.487 Pilot obudzony przez bluetooth  
17:28:19.524 Czekam na odpowiedz  
17:28:19.527 OK+CONN  
17:28:21.670 KASUJ  
17:28:22.453 Dane uzytkownika skasowane  
17:28:22.488 Wylaczenie pilota  
17:28:28.603 Connection lost

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7



### POWODZENIA!

Opracowanie:

Sławomir Malinowski, wersja 1 z dnia 03.03.2020r